


ARDESTO

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПІДЛОГОВІ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

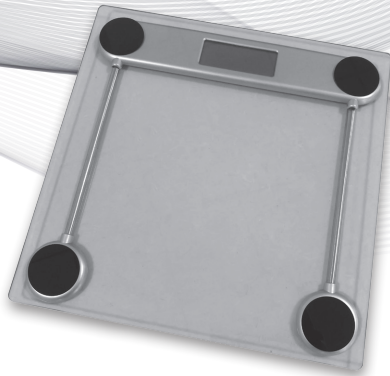

SCB-921

Технічні характеристики:

Максимальна вага:	5.0-150 кг
Дискретність вимірювання	0.1 кг
Оптимальний температурний діапазон:	10-35 °C

Інструкція з експлуатації:

1. Джерело живлення:

Вставте 1x3В літієву батарейку у відсік для батарейок на зворотній стороні ваг.

Обрання бажаної одиниці вимірювання ваги (кілограми, фунти, стоуни).

2. Зважування:

- A. Торкніться поверхні ваг ногою та зачекайте трішки.
- B. Як тільки ваги стабілізуються, на дисплеї з'явиться "0.0". Встаньте на ваги рівно та не рухайтесь. Результат зважування засвітиться на дисплеї.
- C. Зійдіть з платформи. Результат зважування буде світитися ще протягом 10 секунд, після чого ваги автоматично вимкнуться.

3. Вимкнення:

Ваги вимкнуться автоматично після того, як протягом 10 секунд не буде відбуватися процес зважування.

4. Важливі примітки:

У разі незадовільної роботи ваг, спробуйте, будь ласка, замінити батарейку на нову. Іноді низький заряд батареї або несправна батарея призводять до помилок у результатах зважування або інших помилок.

- У разі низького заряду батарейки, на дисплеї з'явиться попереджувальний значок Lo. негайно замінити батарейку.
- Користуйтеся приладом лише на твердій, рівній та сухій поверхні.
- Розташуйте ваги у місці, де не має впливу високих температур або високої вологості. Для очищення використовуйте вологу ганчірку та миючий засіб м'якої дії.
- Не можна ударяти або трясти виріб.
- Якщо ви маєте намір не використовувати прилад тривалий час, виміть батарейку перед зберіганням.

Technical specifications

Capacity:	5.0-150 kg
Graduation:	0.1 kg
Optimum temp range:	10-35 ⁰

Operation Instructions:

1. Inserting batteries:

Insert 1 × 3Vcr2032lithium battery into the battery compartment on the bottom side of the scales.

Selected the desired mode KG, LB, ST.

2. Weighing:

- A. Touch the weighing platform with your foot and wait a few moments.
- B. Once the platform is stable, the LCD will read "0.0". Step onto the weighing platform and your weight will be displayed once you are standing still.
- C. Step off the platform and the reading will hold for 10 seconds before the scales turn off automatically

3. Power off:

The power will shut down automatically after no operation is detected for about 10 seconds.

4. Important notes:

In case of malfunctioning of the scales, please try installing a new battery, sometimes a low battery or defective battery may cause inaccurate readings or other errors.

- When the battery runs very low, the warning logo will appear on the display. When this happens, be sure to replace the battery on the bottoms side of the scale immediately
- Use the unit on hard, flat, dry and secure surface only.
- Place the unit in an area free from high temperatures or high humidity. To clean, use dampened cloth and mild detergent.
- Avoid excessive impact or vibration to the unit.
- If you do not intend to use the unit for a longer period of time, remove the battery before storage.

Умови гарантії побутової техніки ARDESTO:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 3 роки. Дата виробництва вказана на виробі.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона.

Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сервісного центру відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування.

Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона. У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Шановний покупцю!

Дякуємо вам за придбання продукції ARDESTO і висловлюємо впевненість, що її використання принесе вам лише задоволення. Гарантійний термін починається з дати придбання цього продукту першим кінцевим споживачем. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності належним чином заповненого гарантійного талону з печаткою та підписом продавця, в якому чітко вказано серійний номер і модель продукту, найменування та адресу продавця.

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Талон №1

Дата звернення	<input type="text"/>
Причина	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Дата виконання	<input type="text"/>
Продавець	<input type="text"/>

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Назва	<input type="text"/>
Серійний номер	<input type="text"/>
Дата продажу	<input type="text"/>
Продавець	<input type="text"/>
Підпис клієнта	<input type="text"/>
Термін гарантійного обслуговування складає <input type="text"/> місяців з дня продажу.	Місце для печатки торговельної організації <input type="text"/>
Цим надаю згоду на доведення до мене інформації про продукцію за допомогою засобів дистанційного зв'язку, зокрема, мережі Інтернет. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю. Продукт отримано в робочому стані, без пошкоджень та в повному комплекті.	

ARDESTO