

PHILIPS

AVENT

Накладки на соски

Тепло материнской груди при кормлении

Защита сосков от раздражения

Средние (21 мм)

2 шт.



SCF153/03



Для долгого и комфортного кормления грудью*

Удобный захват для малыша и бережный контакт с вашей кожей*

Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с грудью и помогает поддерживать связь с малышом при кормлении.

Функции устройства

- Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди
- Удобная форма

Легкий захват для малыша*

- Созданы для устранения проблем с захватом

Когда использовать накладку на сосок


- Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью
- Малыш сможет пить с удобной ему скоростью
- Сочетание грудного вскармливания и кормления из бутылочки

Футляр для обеспечения гигиены

- Простая очистка в гигиеничном футляре для переноски


Основные особенности

Уникальная форма бабочки

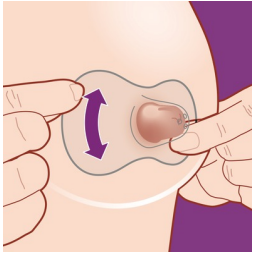


Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.

Созданы для легкого захвата*

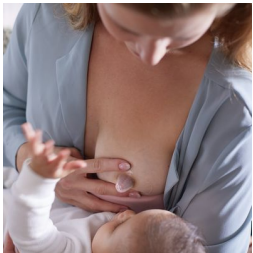

Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить их*. Накладки помогут матерям с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать — накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.

Защита сосков во время кормления

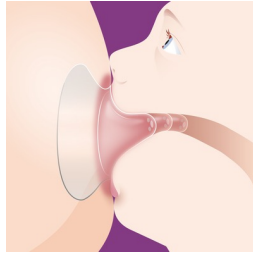

Накладки на соски созданы для более комфортного кормления и подойдут для матерей, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.

Кормите в темпе, удобном малышу




Если поток грудного молока необходимо контролировать либо у ребенка не хватает сил, чтобы пить его, накладки для сосков также помогут вам решить возникшую проблему. Три отверстия на кончике накладки помогут стабилизировать поток в случае чрезмерного количества молока. Таким образом малыш сможет пить в удобном темпе даже в случае слишком большого количества молока у матери.

Сочетание грудного вскармливания и кормления из бутылочки

Накладки на соски Philips Avent изготовлены из сверхтонкого и мягкого силикона, схожего с тем, что используется в наших решениях для кормления малышей — он обеспечивает простой переход с кормления грудью на кормление из бутылочки.

Доступно в двух размерах

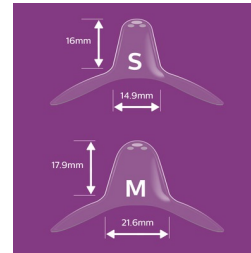

Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.

Легкая очистка



Перед каждым использованием накладки на соски нужно очищать; это занимает менее 10 минут. Поместите их в кипящую воду на 5 минут либо используйте гигиеничный футляр. Поместите хорошо промытые накладки в футляр и добавьте 25 мл воды. Затем поместите футляр в микроволновую печь мощностью 750–1000 Вт на три минуты. Дайте накладкам остыть в течение пяти минут. Затем вылейте воду; накладки готовы к использованию. Используйте удобный гигиеничный футляр в поездках, чтобы хранить накладки в чистоте.

Характеристики

В комплект входят:

Накладки на соски 21 мм: 2 шт.

Гигиеничный футляр для переноски: 1 шт.

Дизайн

Дизайн в форме бабочки: Да

Материал

Накладки на соски: Без бисфенола-А*, силикон

